



Yes, you can.®

Invacare® Platinum® 9

Reduzca costos con el concentrador de alto flujo Invacare® Platinum® 9

Con el nuevo **Platinum® 9**, Invacare® extiende la gama de concentradores y le ofrece una solución fiable y total con el mayor valor añadido para los pacientes que necesitan oxígeno-terapia.

El **Platinum® 9** es un concentrador de alto flujo y totalmente compatible con el sistema **HomeFill®**, que minimiza los costos asociados al mantenimiento y envío, mientras optimiza la concentración de oxígeno y gracias a una serie de alarmas integradas permite a los pacientes permanecer cómodamente en casa.

Los usuarios apreciarán la simplicidad de uso combinada con la máxima seguridad.



Alto rendimiento con la mayor seguridad y más sencillo

Invacare® **Platinum® 9** se caracteriza por el fácil manejo y al mismo tiempo por su potencia y confiabilidad.

Platinum® 9 está diseñado para pacientes con altas necesidades de oxígeno, por su capacidad de 9 litros de oxígeno y con una concentración de 95,6 - 87% de pureza.

Platinum® 9 es fácil de maniobrar gracias a las ruedas y al asa integradas, de igual forma, su utilización es sencilla y garantiza mayor seguridad para el usuario :

- Fácil acceso al indicador de flujo
- El sensor que controla el nivel de O₂ en el panel
- Interruptor con posición de encendido y apagado
- Cortacircuitos automático
- Fácil acceso al humidificador
- Compresor de doble cabeza que asegura una mayor fiabilidad



Valor añadido asociado al control de costos

Gracias al reducido número de piezas y accesorios, el costo del inventario relacionado con ellos estará en su nivel mínimo.

Invacare® le ofrece el mejor valor añadido en un concentrador, ya que no existe costo de envío ni gasto de mantenimiento por 5 años.



Conexión reforzada del cable de corriente



Únicamente un filtro a cambiar en los controles



Puerto de conexión para HomeFill®

Información Técnica

Rendimiento

Fluido ajustable	1-9 l/min.	Concentración de Oxígeno
Presión de salida del oxígeno	62 kPa	2,7 l/min 95,6-93%
Temperatura de salida del oxígeno	+2,2 / temperatura ambiente	8 l/min 95,6-91%
Nivel de sonido	< 50 db(a)	9 l/min 95,6-87%
Batería	no	
Alarma flujo mínimo de oxígeno	< 1 l/min	
Alarmas niveles de concentración	> 85% luz verde	
	> 73% luz amarilla	
	< 73% luz roja y alarma de sonido	
Sistema de autodiagnóstico	código de errores	


Especificaciones Técnicas



36,5 cm



46,7 cm

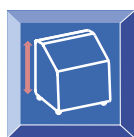

67 cm



24 kg



230 V, 50-60 Hz



475 W

Toda la información solicitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare® se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.